


CHARMANT ClariShield

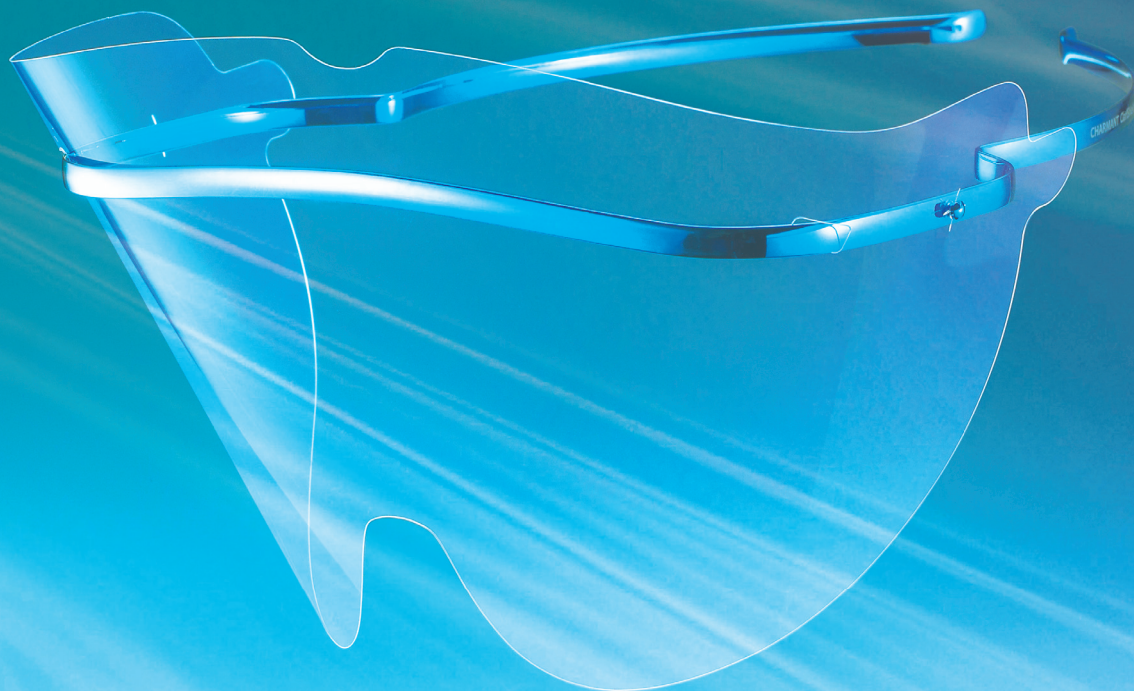


抜群の透明感&超低反射・防曇のシールド性能

High visibility, Anti-reflective & anti-fogging.

超軽量&圧倒的な掛け心地のフレーム性能

Ergonomically designed for maximum fit & function.

- 抜群の透明感に加え、
映りこみを極限までカット!
Highly transparent and reduces
reflection.

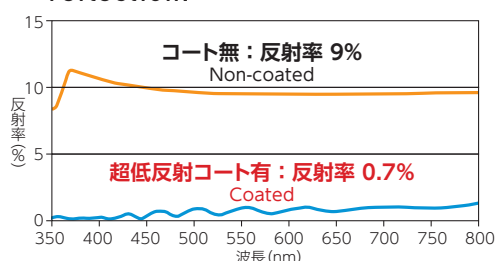

超低反射コート有 Coated



コート無 Non-coated

- コート無しの場合は照明の反射による映りこみが発生します。
- Product without anti-reflective coating

- メガネフレームとの併用も可能
Fit comfortably over eyeglasses




- カラーは4色展開 Color variation



CHARMANT


製品特徴

クラリシールドはシャルマンの頭部データベースと掛け心地の研究からデザインされたフレームに、超高透過と超低反射性を備えたフィルムを組み合わせた、医療安全の向上に最適化された製品です。

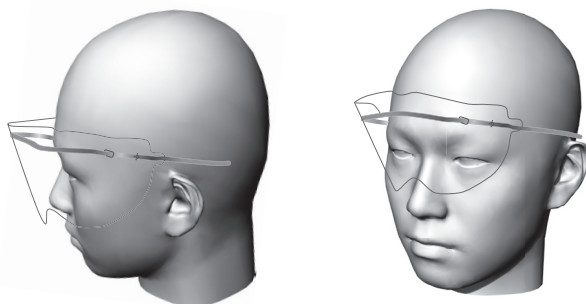



Product features

ClariShield combines Charmant's scientific study on head measurements to produce the secure and comfortable chassis coupled with a highly transparent and anti-reflective shield.

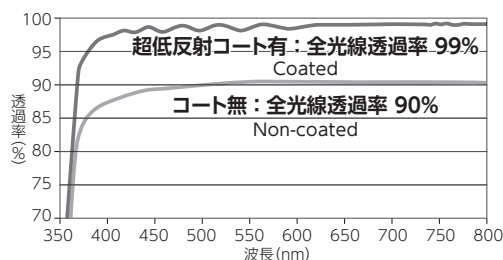

シールドの取り付け方

How to assemble your ClariShield

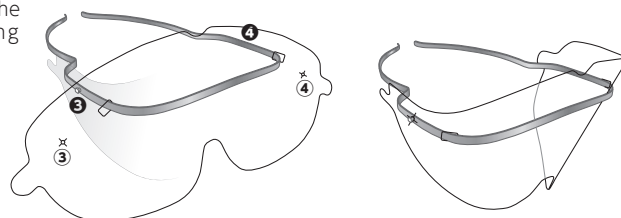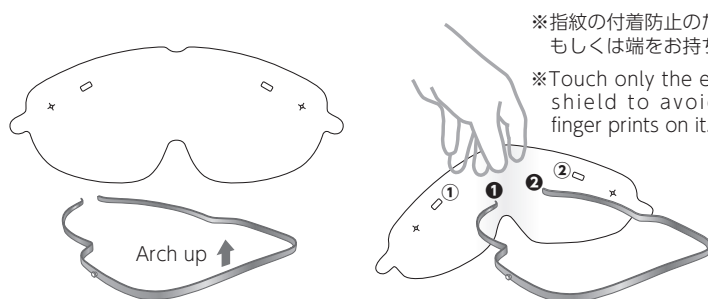

- (1) フレーム及びシールドの上下は図示のようになります。フレームの上下方向にはカーブがあるので、図を参照にご確認ください。
- (2) シールドをフレームに固定する場合はシールドの穴①にフレームの先端部①を、シールドの穴②にフレームの先端部②を通してください。
- (3) シールドをフレームに通した後にシールド穴③をフレーム③に、シールド穴④をフレーム④に入れ込んで固定します。
- (4) シールドがフレームにきちんと固定されているかを確認し、ご使用ください。

1. Identify top and bottom of the chassis and shield as per the drawing.
2. Insert the chassis tips ① and ② into the holes ① and ② on the shield.
3. Align holes ③ and ④ to pins ③ and ④.
(Hook ③ and ④ to pins ③ and ④)
4. Before using, make sure the shield is securely fixed.

Item	SKU	Color	Material
Frame	61-1001 MB	Blue	Titanium alloy
	61-1001 MG	Green	Titanium alloy
	61-1001 MP	Pink	Titanium alloy
	61-1001 MS	Silver	Titanium alloy
Shield (x50pcs.)	61-1101	-	PET/Acrylic resin
Rack	61-1201	-	Acrylic resin

- フレームの仕様(日本製)
本体:チタン合金
表面処理:陽極酸化
- シールドの仕様(日本製)
PET/アクリル樹脂
- 10本掛ラックの仕様(日本製)
アクリル樹脂

- Chassis (made in Japan)
Material : Titanium alloy
Surface Treatment : Anodic oxidation
- Shield (made in Japan)
Material : PET/Acrylic resin
- 10 pcs.Rack(made in Japan)
Material : Acrylic resin

- オプション:10本ラック
Option : 10 pcs. Rack



CHARMANT

●お問い合わせ先
株式会社 シャルマン メディカル事業部 カスタマーサービス
〒916-8555 福井県鯖江市川去町6-1
TEL.0120-180807 FAX.0120-030887 www.charmant-medical.com

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 ※Not all products are available in all markets. ※Designs and specification subject to change without notice