

CHARMANT ClariShield



飛沫防護シールドに驚きの視界

A stealth splash shield

抜群の透明感&超低反射・防曇のシールド性能




High visibility, anti-reflective & anti-fogging.

超軽量&圧倒的な掛け心地のフレーム性能

Ergonomically designed for maximum fit & function.

- 男性用&女性用に
2サイズ×4カラー展開
Size & Color variation


M size : 100.0mm
S size : 90.0mm

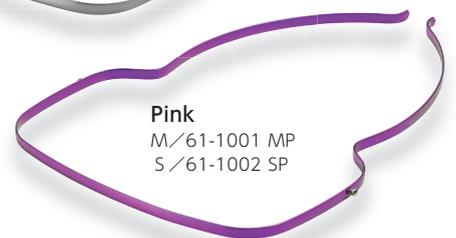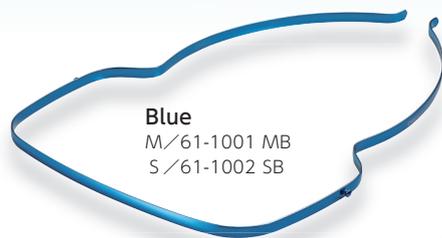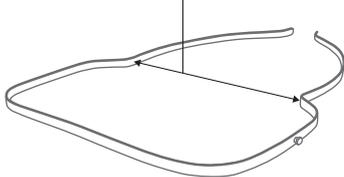

- メガネフレームとの併用も可能
Fits comfortably over eyeglasses



- 抜群の透明感に加え、
映りこみを極限までカット!
Highly transparent and reduces
reflection.

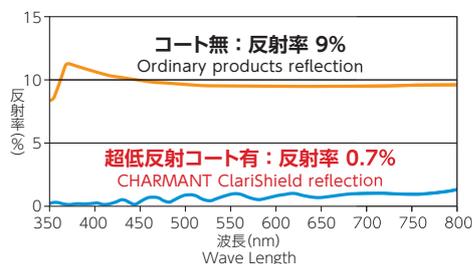


- コート無しの場合は照明の反射による映りこみが発生します
● Comparison of reflection



製品特長


クラリシールドはシャルマンの頭部データベースと掛け心地の研究からデザインされたフレームに、超高透過と超低反射性を備えたフィルムを組み合わせた、医療安全の向上に最適化された製品です。

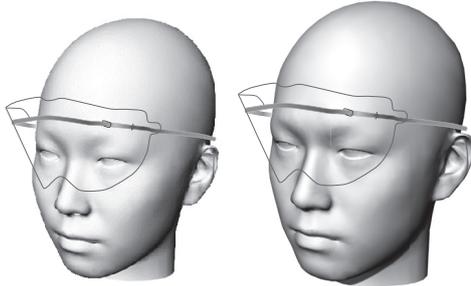

●顔型研究から算出された平均的日本人男性・日本人女性の3Dモデルを使って設計しています。


Product features

ClariShield combines Charmant's scientific study on head measurements to produce the secure and comfortable chassis coupled with a highly transparent and anti-reflective shield.

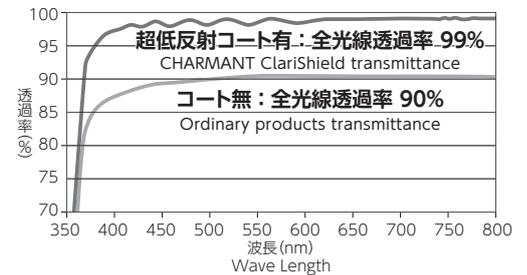


シールドの取り付け方

How to assemble your ClariShield

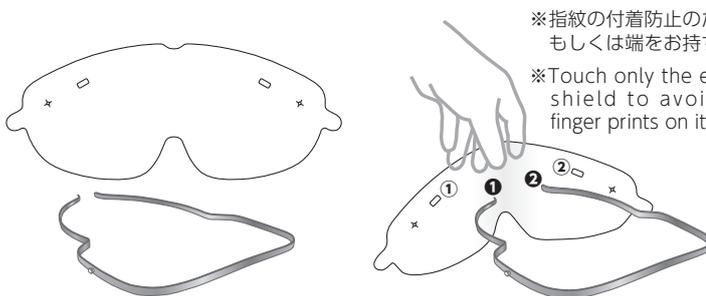

※指紋の付着防止のため、上部もしくは端をお持ちください。

※Touch only the edge of the shield to avoid leaving finger prints on it.

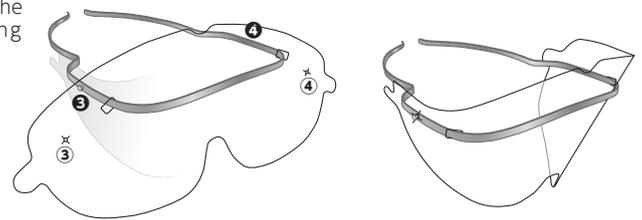

- (1) シールドをフレームに固定する場合はシールドの穴①にフレームの先端部①を、シールドの穴②にフレームの先端部②を通してください。
- (2) シールドをフレームに通した後にシールド穴③をフレーム③に、シールド穴④をフレーム④に入れ込んで固定します。
- (3) シールドがフレームにきちんと固定されているかを確認し、ご使用ください。

1. Insert the chassis tips ① and ② into the holes ① and ② on the shield.
2. Align holes ③ and ④ to pins ③ and ④. (Hook ③ and ④ to pins ③ and ④)
3. Before using, make sure the shield is securely fixed.

Item	SKU	Color	Material
M size	61-1001 MB	Blue	Titanium alloy
	61-1001 MG	Green	Titanium alloy
	61-1001 MP	Pink	Titanium alloy
	61-1001 MS	Silver	Titanium alloy

Item	SKU	Color	Material
S size	61-1002 SB	Blue	Titanium alloy
	61-1002 SG	Green	Titanium alloy
	61-1002 SP	Pink	Titanium alloy
	61-1002 SS	Silver	Titanium alloy

Item	SKU	Color	Material
Shield (x50pcs.)	61-1101	-	PET/Acrylic resin
Rack	61-1201	-	Acrylic resin

- フレームの仕様(日本製)
本 体:チタン合金
表面処理:陽極酸化
- シールドの仕様(日本製)
PET/アクリル樹脂
- 10本掛ラックの仕様(日本製)
アクリル樹脂

- Chassis (made in Japan)
Material : Titanium alloy
Surface Treatment : Anodic oxidation
- Shield (made in Japan)
Material : PET/Acrylic resin
- 10 pcs.Rack(made in Japan)
Material : Acrylic resin

- オプション:10本ラック
Option : 10 pcs. Rack



“製品によって販売されていない地域があります。” “Not all products are available in all markets.”

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 ※Designs and specification subject to change without notice

CHARMANT

●お問い合わせ先

株式会社 シャルマン メディカル事業部 カスタマーサービス

〒916-8555 福井県鯖江市川去町6-1 www.charmant-medical.com

TEL.0120-180807 FAX.0120-030887 For English, medical@charmant.co.jp